

Kratki proceduralni priručnik za osoblje IZVAN JIL-a


Što učiniti kad se oglasi alarm za krvni tlak

KADA OBAVLJATI?


1. Kad se oglasi alarm za krvni tlak
2. Prilikom promjene položaja pacijenta

KAKO OBAVLJATI?

- a) Pogledajte monitor da biste provjerili zašto se oglasio alarm
- b) Prikazuje li monitor normalnu arterijsku krivulju
- c) Provjerite neinvazivni monitor krvnog tlaka (NIBP)

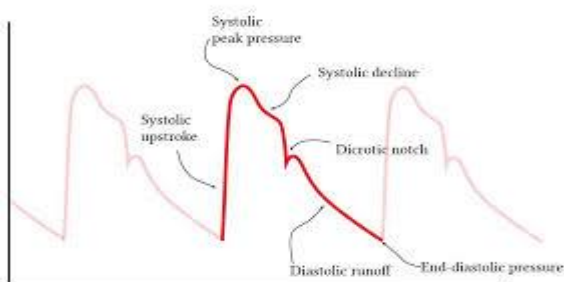

- a) Je li položaj tlačnog pretvarača (transducer) u razini s pacijentovim srcem
- b) Provjerite je li tlačna vrećica na 300 mmHg

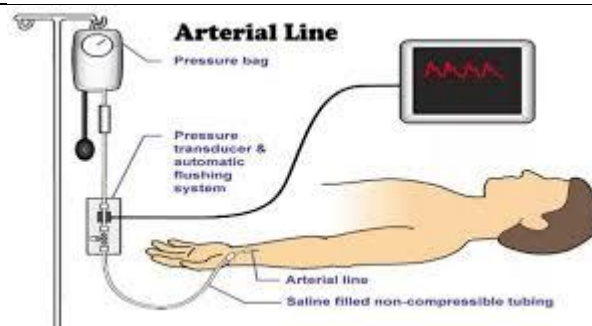

- a) Provjerite položaj pacijentova ekstremiteta u koji je uveden arterijski kateter
- b) Provjerite ima li na mjestu uvođenja znakova upale, pomicanja, savijanja.
- c) Mijenja li se krivulja krvnog tlaka kad se ekstremitet pomakne



KLJUČNI SIGURNOSNI PROBLEMI / KADA POZVATI POMOĆ

1. Ako je srednji arterijski krvni tlak (MAP) <65mmHg: **pozovite pomoć**
2. Smanjena razina svijesti: **pozovite pomoć**
3. **Nikada ne isključujte alarme**
4. **Uvijek provjerite jesu li trostrane skretnice zatvorene nakon uzimanja krvi**